


Aplikace Thrive Hearing Control - uživatelská příručka

Blahopřejeme Vám, že jste se vydali
na cestu k lepšímu slyšení

thrive

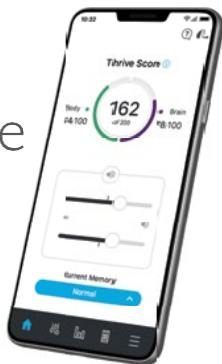

Aplikace Thrive Hearing Control

Úvod	4
Uživatelé Apple	
Párování/připojování	5
Stahování	8
Uživatelé Android	
Stahování	9
Párování/připojování	10
Základní obrazovka	
Nastavení	13
Nápověda	13
Stav připojení	13
Asistent Thrive	13
Aktuální paměť	13
Skóre Thrive	13
Hlasitost	14
Ticho	14
Navigace	14
Home	15
Menu pro paměť	15
Obrazovky pro parametry	
Obrazovky pro parametry	16
Ekvalizér	16
Řeč v šumu	16
Strojový šum	17
Vítr	17
Směr mikrofonu	18
SoundSpace	18

Obrazovky pro skóre Thrive	
Celkové	19
Mozek	19
Tělo	20
Detekce pádu a upozornění	21
Příslušenství	23
IntelliVoice	23
Nastavení	
Uživatelská příručka	24
Nastavení zařízení	24
Skóre Thrive	25
Upozornění na pád	26
Překladač	27
Přepis	27
Samokontrola	28
Upomínky	28
Hearing Care Anywhere - péče u sluch kdekoli	30
Aplikace Thrive Care	31
Hledání sluchadel	32
Nastavení aplikace	32
O nás	32
Demo mód	33

Vlastnosti se mohou lišit podle konkrétního produktu a technologického prostředí. Tato aplikace může vykazovat menší rozdíly v závislosti na modelu telefonu a sluchadel.

Sluchadla kompatibilní s produkty Thrive



Výše jsou vyznačena sluchadla Thrive na platformě 2,4 GHz, která spolupracují s aplikací Thrive Hearing Control.

Apple nebo Android

Operační systém iOS nebo Android je odpovědný za správu konektivity mezi zařízením(i) Apple nebo Android a sluchadly kompatibilními s aplikací Thrive. Aplikace Thrive Hearing Control je doplňkem ke sluchadlům nabízejícím různé další možnosti nastavení. S aplikací Thrive si můžete nastavit sluchadla tak, aby vyhovovala vašemu životnímu stylu.


POZNÁMKA K AKTUALIZACI iOS: Při aktualizaci verze iOS na zařízení iPhone může dojít ke ztrátě připojení sluchadel, a sluchadla s telefonem je potom třeba odpárovat a znovu spárovat.

Pro nejaktuálnější informace o kompatibilitě navštivte stránku starkey.com/thrivesupport


Konektivita pro zařízení Apple

Abyste mohli používat aplikaci Thrive, musíte nejprve spárovat sluchadla se zařízením iOS.


- 1 Ujistěte se, že je na iOS zařízení aktivováno nastavení pro Bluetooth®. V menu Nastavení přejděte na Bluetooth a přepněte na Zap.
- 2 Vypněte a opět zapněte sluchadla. Tím se sluchadla přepnou do režimu párování.
- 3 V menu Nastavení přejděte na [Přístupnost](#) > [Naslouchací pomůcky](#).

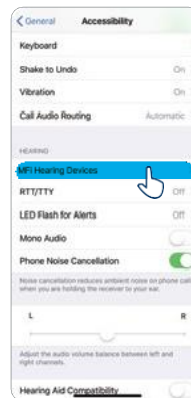

- Když iOS zařízení poprvé najde vaše sluchadla, zobrazí se jejich název (např. „Sluchadla - Chris“).
- Pokud se vaše jméno neobjeví v seznamu „Zařízení“ do 5–7 sekund, klepněte na [Přístupnost](#) v levém horním rohu, poté na [Naslouchací pomůcky](#).

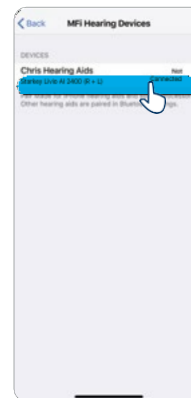


- 4 Klepněte na název příslušného sluchadla pro jeho připojení k zařízení iOS.
- 5 Zobrazí se dva požadavky na spárování (po jednom pro každé sluchadlo). Zvolte **Spárovat** pro jednotlivé požadavky. Tyto požadavky mohou být několik sekund od sebe.
- 6 Když je párování dokončeno, název sluchadla se změní z černého na modrý.

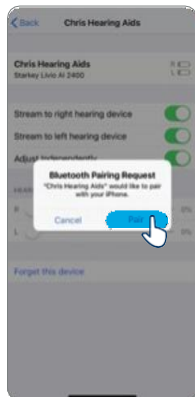

Obnova připojení sluchadel k zařízení Apple

Když vypnete sluchadla nebo zařízení Apple, zruší se tím jejich vzájemné propojení. Pro obnovení připojení zapněte zařízení Apple a poté zapněte sluchadla.

Sluchadla se automaticky připojí k zařízení Apple. Toto připojení si můžete také ověřit použitím zkratky pro Přístupnost (trojitě klepnutí na tlačítko Home) a poté zkontrolováním, že vaše sluchadla byla detekována.

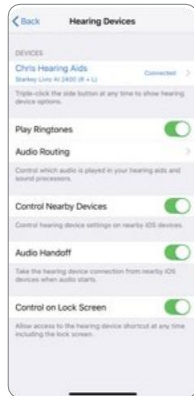

Stažení aplikace Thrive pro zařízení Apple

Aplikace Thrive usnadňuje ovládání a nastavování sluchadel pomocí zařízení kompatibilního s Apple. Stažení aplikace je snadné.

Postupujte podle dále uvedených kroků:

Krok jedna: Na zařízení kompatibilním s Apple otevřete „App Store.“



Krok dva: Do vyhledávacího pole zadejte „Thrive Hearing Control“.



Krok tři: Zadejte „GET“ pro stažení aplikace na své zařízení. Pro nastavení aplikace postupujte podle zobrazených pokynů.



Krok čtyři: Jakmile je aplikace nainstalovaná, otevřete aplikaci Thrive z obrazovky Home nebo seznamu aplikací.



Stažení aplikace Thrive pro zařízení Android


Aplikace Thrive usnadňuje ovládání a nastavování sluchadel pomocí zařízení kompatibilního s Android. Stažení aplikace je snadné.

Postupujte podle dále uvedených kroků:

Krok jedna: Na zařízení kompatibilním s Android otevřete „Google Play Store.“



Krok dva: Do vyhledávacího pole zadejte „Thrive Hearing Control“.

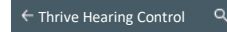

Krok tři: Zadejte „GET“ pro stažení aplikace na své zařízení. Pro nastavení aplikace postupujte podle zobrazených pokynů.



Krok čtyři: Jakmile je aplikace nainstalovaná, otevřete aplikaci Thrive z obrazovky Home nebo seznamu aplikací.



Konektivita pro zařízení Android

Pro připojení sluchadel k zařízení Android postupujte podle dále uvedených pokynů. Pokud sluchadla ztratí připojení k zařízení, opakujte dále uvedené pokyny pro jeho obnovení.

1. Spustíte aplikaci Thrive.
2. Po vyhledání se na obrazovce zobrazí dostupná sluchadla.
POZNÁMKA: Jednotlivá sluchadla se zobrazí zvlášť.
3. Zaškrtněte pole vedle jednotlivých sluchadel a zvolte **Připojit**.

POZNÁMKA: Párování lze také dokončit pomocí menu Bluetooth na zařízení Android, pokud tomu dáváte přednost.

Obnova připojení sluchadel k zařízení Android


Když vypnete sluchadla nebo zařízení Android, zruší se tím jejich vzájemné propojení. Pro obnovení připojení zapněte zařízení Android a poté zapněte sluchadla.

Sluchadla se automaticky připojí k zařízení Android. Máte-li potíže s obnovou připojení sluchadel a aplikace, zkontrolujte nastavení pro Bluetooth na zařízení Android a ujistěte se, že sluchadla jsou stále zpárována, a pokud ne, opakujte proces párování.

Spuštění/nastavení

Při prvním spuštění aplikace Thrive budete vyzváni k přečtení a potvrzení licenčního ujednání a zásad důvěrnosti údajů a rovněž k parametrizaci nastavení aplikace. Budete mít možnost nastavit upozornění na oznámení a zřídit si cloudový účet pro funkci Hearing Care Anywhere. Aplikace Thrive se spustí ve výchozím rozšířeném (Advanced) módu; prostřednictvím menu Nastavení můžete po instalaci stanovit základní (Basic) mód.

Stav připojení

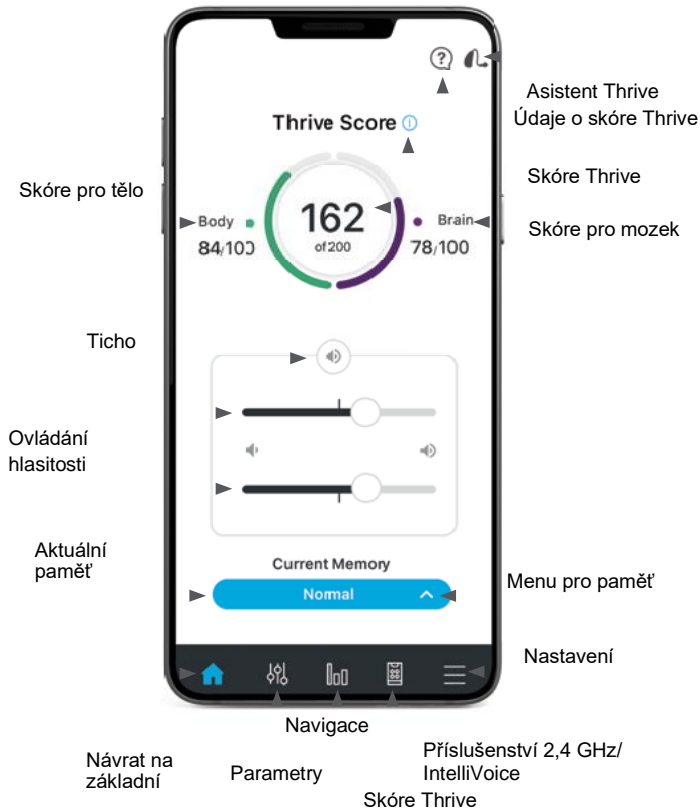

Tato aplikace může vykazovat menší rozdíly v závislosti na modelu telefonu a/nebo sluchadel.

Nastavení

Klepněte pro otevření menu. Pro úplný popis viz oddíl Nastavení.

Nápověda

Nápověda vysvětluje funkci jednotlivých obrazovek. Všechny soubory nápovědy lze najít v [Nastavení](#) > [Uživatelská příručka](#).

Stav připojení

Klepněte pro zobrazení aktuálního stavu připojení pro svá sluchadla.

Asistent Thrive*

Pomocí Asistenta Thrive můžete v rámci aplikace Thrive spustit hlasového pomocníka pro pokládání dotazů jako například „Jak upravit u sluchadel nastavení?“ Asistent Thrive využívá mikrofon telefonu k poslechu vašeho dotazu, poté vám poskytne odpověď prostřednictvím souboru nápovědy nebo cloudových služeb. Asistent Thrive lze spustit pomocí ikony v aplikaci Thrive nebo dvojitým klepnutím na sluchadla Edge AI 2400 nebo AI 2000/1600.

Funkce **hledání telefonu** vám pomůže najít ztracený nebo založený telefon pouhým dvojitým klepnutím na sluchadla Edge AI 2400 nebo AI 2000/1600. Použijte fráze jako například „Nemohu najít svůj telefon“ nebo „Kde je můj telefon?“

Aktuální paměť

Zde se zobrazuje aktuální paměť, kterou používáte.

Skóre Thrive

Shrnutí kondice mozku a těla. Objeví se, pouze pokud používáte sluchadla Edge AI nebo AI.

*Vyžaduje cloudový účet.

Hlasitost


Hlasitost na sluchadlech zvýšíte/snížíte posunutím posuvníku hlasitosti pro jednotlivé strany nebo pomocí posuvné podložky (mezi levým a pravým posuvníkem hlasitosti) pro souběžné nastavení obou stran. Dvojitým klepnutím na posuvnou podložku vrátíte hlasitost na výchozí úroveň nastavenou vaším audiologem.

Ticho

Tlačítkem Ticho (Mute) se ztiší mikrofony na obou sluchadlech. Dalším klepnutím se ztišení sluchadel ruší.

Navigace

Navigační lišta v dolní části obrazovky umožňuje přístup k běžně používaným oddílům Parametry, Skóre Thrive, Příslušenství a Nastavení.

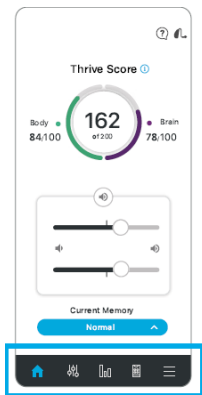


Home

Klepněte na ikonu Home na navigační liště pro návrat na hlavní obrazovku.

Menu pro paměť

Klepněte na ikonu Menu pro paměť pro zobrazení a volbu dostupných pamětí nebo vytvoření nové paměti nebo editování některé paměti.

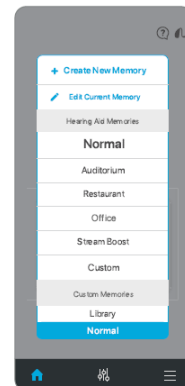


Obrazovky pro parametry



Klepněte na Parametry na navigační liště pro přístup k různým parametrům nastavení pro personalizaci paměti svých sluchadel.


Ekvalizér

Parametrizace nabízí posuvníky ekvalizéru pro několik frekvenčních pásem. Můžete je posunovat nahoru/dolů pro dosažení preferované kvality zvuku. Jsou možná rozdílná nastavení pro jednotlivé paměti.

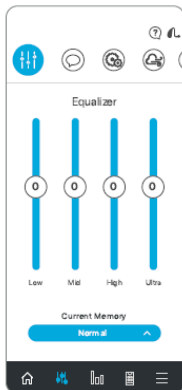


Řeč v šumu

Funkce řeči v šumu snižuje množství šumu na pozadí, který vstupuje do sluchadel. Lze provést zvláštní nastavení pro jednotlivá sluchadla. Nastavení dále doprava zajišťuje více komfortu při šumu.

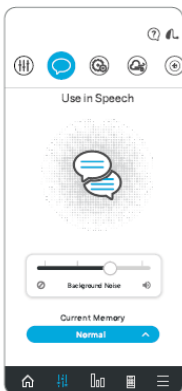


Strojový šum

Funkce pro strojový šum potlačuje zvuky vytvářené strojními zařízeními pro zvýšení komfortu v hlučných prostředích. Nastavení dále doprava zajišťuje více komfortu při šumu.

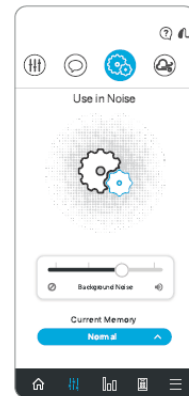


Vítr

Funkce pro vítr umožňuje potlačování zvuku větru foukajícího přes mikrofony sluchadlo zvlášť pro jednotlivé paměti. Nastavení dále doprava zajišťuje více komfortu při větru.

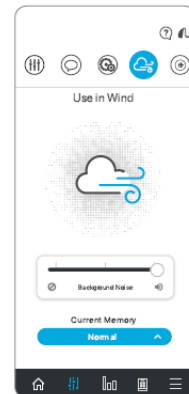


Směr mikrofonu

Funkce pro směr mikrofonu poskytuje možnost ovládní pro zvuk kolem vás pro jednotlivé paměti. Pomocí této funkce zlepšíte svou schopnost poslechu rozhovorů díky zaměření mikrofonu na zvuky před vámi. V automatickém módu se následují zvuky řeči na základě úrovně hlasitosti.

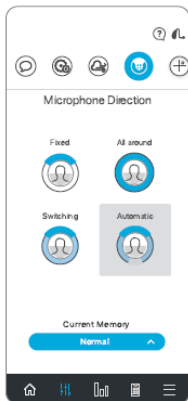

SoundSpace

Funkce SoundSpace umožňuje používání zařízení iOS jako osobního nástroje pro nastavování sluchadel. Poskytuje možnost modifikovat odezvu pro libovolnou ze zákaznických pamětí Thrive tak, aby lépe vyhovovala konkrétnímu prostředí. Když posouváte prst po prázdné obrazovce, nastavení ve sluchadlech se přechodně mění, takže můžete naslouchat při různých nastaveních.

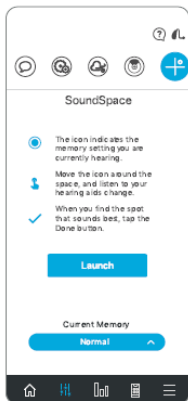

Thrive Score*


Celkové Skóre kondice Thrive je kombinací skóre pro mozek a pro tělo. Každý den můžete dosáhnout skóre 200.

Mozek** - sledování zahrnuje tři segmenty. Jednotlivé segmenty mají bodové hodnoty odrážející způsob používání sluchadel. Aplikace Thrive odečítá údaje o používání ze sluchadel a zobrazuje body pro každodenní pokrok. Vaším cílem je dosažení 100 bodů za den.

Body v rámci **Použití** získáváte každodenním nošením svých sluchadel. Čím více je používáte, tím více získáte bodů (možnost 40).

Body v rámci **Zapojení** získáváte používáním sluchadel k propojení s ostatními lidmi. Čím delší dobu strávíte v prostředích s rozhovory, tím více získáte bodů (možnost 40).

Body v rámci **Prostředí** získáváte, když se sluchadla přizpůsobují náročným poslechovým prostředím (možnost 20).

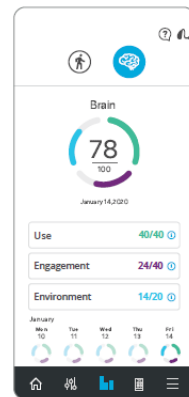

*Pro sluchadla Edge AI a AI.

**Pro sluchadla Edge AI 2400 a AI 2000/1600/1200.


Sledování pro **Tělo*** zahrnuje pokrok směřující ke třem každodenním cílům pro fyzickou aktivitu. Splnění všech tří cílů znamená dosažení plných 100 bodů. Sluchadlo zaznamenává kroky a příslušné údaje se v průběhu dne přenáší do aplikace. V oblasti pro nastavení si můžete stanovovat/měnit cíle.

Kroky (Steps) - zde se zobrazuje pokrok vůči cílovému dennímu počtu kroků (možnost 40 bodů).

Cvičení (Exercise) - zde se zobrazuje pokrok vůči cílovému dennímu intenzivnímu cvičení (možnost 40 bodů).

Vstávání (Stand) zde se zobrazuje pokrok vůči cíli spočívajícím ve vstání a pohybování každou hodinu (možnost 20 bodů).

POZNÁMKA: Sluchadla se musí během dne pravidelně připojovat k telefonu a na pozadí musí být v telefonu otevřena a zapnuta aplikace Thrive.

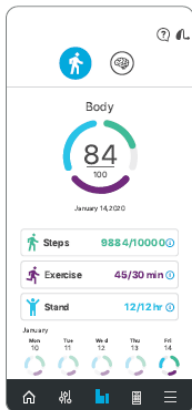

*Pro sluchadla Edge AI 2400 a AI 2000/1600/1200/1000.

Detekce pádu a upozornění*



Funkci upozornění na pád lze využívat k zaslání upozornění formou textové zprávy obsahující vaše GPS souřadnice stanoveným kontaktním osobám, pokud byste upadli nebo se vám přihodila jiná událost nesouvisející s pádem. Upozornění na pád lze nakonfigurovat pro odesílání automatických a/nebo ručně spouštěných upozornění.

Funkce **Auto upozornění** umožňuje, aby senzory ve sluchadlech automaticky detekovaly pád.

Funkce **Ruční upozornění** vám umožňuje „stisknout a podržet“ ovládací prvek na některém sluchadle pro vytvoření textové zprávy s upozorněním.

Textová zpráva s upozorněním bude v aplikaci Thrive iniciována, pokud dojde k automatické detekci pádu nebo pokud ji sami spustíte. Textová zpráva bude zaslána nejvýše třem předem stanoveným kontaktním osobám, které mohou potvrdit její přijetí a zobrazit si mapu s vyznačením místa, kde se nacházíte.

*Pro sluchadla Edge AI.

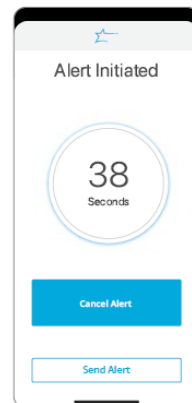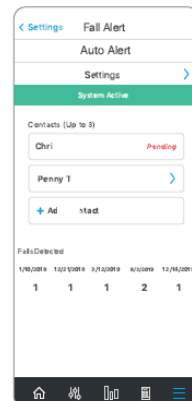

Funkce **Zrušení upozornění** vám umožňuje zrušit automatické upozornění nebo ruční upozornění jak ze sluchadel, tak z chytrého telefonu. Pro zrušení textové zprávy s upozorněním z vašich sluchadel stiskněte ovládací prvek na jednom ze sluchadel. O zrušení budete informováni v aplikaci Thrive i prostřednictvím indikace hovoru u sluchadel. Zprávy s upozorněním na pád lze zrušit do uplynutí doby pro zrušení přednastavené na 60 nebo 90 sekund po vytvoření upozornění.

Ve funkci **Contacts** můžete stanovit až tři kontaktní osoby, kterým si přejete zaslat textovou zprávu s upozorněním. Musíte zadat jméno a telefonní číslo pro každou kontaktní osobu do aplikace Thrive. Jednotlivé kontaktní osoby obdrží textovou zprávu s požadavkem na potvrzení účasti ve vašem systému upozorňování na pád.


Příslušenství

Aplikace Thrive umožňuje ovládání streamování zvuku z většiny příslušenství 2,4 GHz. Tato příslušenství se přímo párují se sluchadly. Po klepnutí na ikonu Příslušenství na navigační liště můžete zvolit spárovaná příslušenství, spouštět a vypínat streaming zvuku a ovládat hlasitost jak streamingu, tak okolních zvuků.

IntelliVoice* spojuje výhody mikrofonu v chytrém telefonu s výpočtovou kapacitou umělé inteligence. Přínosem je účinnější a flexibilnější vylepšování řeči v nejnáročnějších poslechových prostředích pouze pro pacienty se závažným poškozením sluchu. Další informace si vyžádejte od svého audiologa.

**Pro sluchadla Edge AI.*

Dostupné pouze pro chytré telefony iOS.

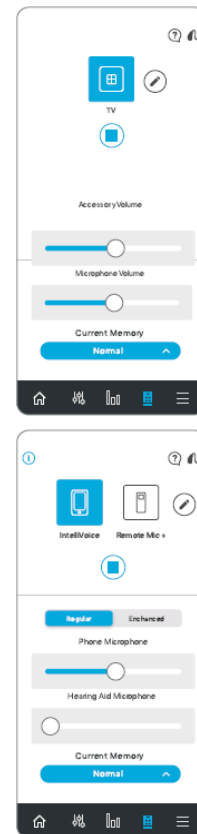

Uživatelská příručka

V aplikaci Thrive je k dispozici přehled jednotlivých obrazovek/funkcí. Jednotlivé oddíly zobrazují údaje obrazovek a popisují jednotlivé funkce.

Nastavení zařízení

V této oblasti lze zapnout/vypnout nebo upravit rozšiřující nastavení pro sluchadla.

Funkce pro **gesto poklepání*** vám umožňuje aktivovat nebo deaktivovat gesta, nastavit citlivost a zvolit funkci pro aktivaci gesta (asistent Thrive, příslušenství start/stop streaming nebo mód Edge**).

Asistent Thrive umožňuje hlasové pokládání otázek o aplikaci Thrive, obecných otázek zodpídaných z internetu (jste-li přihlášení), ovládání sluchadel s ohledem na změny paměti nebo hlasitosti nebo nastavování upomínek. Příklady pro hlasový příkaz: „zmeň paměť na restauraci“ nebo „nastav upomínku na vyzvednutí receptu zítřa v 15:00.“

Mód Edge** umožňuje provádět automatické vyhodnocení aktuálního poslechového prostředí a sluchadla Edge AI pro vás potom vytvoří optimalizovaná nastavení na základě charakteristik tohoto prostředí. Tato nastavení budou platná, dokud neprovedete změnu paměti nebo nerestartujete sluchadla.

*Pro sluchadla Edge AI a AI.

**Pro sluchadla Edge AI.

Funkce **Auto Streaming** umožňuje sluchadlům rozpoznání začátku zvukového streamování a automatické přepnutí na jinou paměť a redukci mikrofonu specificky optimalizovanou pro zvukový streaming.

Funkce **Comfort Boost** umožňuje sluchadlům podstatné snížení šumu při současné optimalizaci kvality zvuku v hlučných prostředích.

Funkce **Upozornění (Alerts)** umožňuje sluchadlu přehrání výstražného tónu pro určitá oznámení telefonu, například události kalendáře, email a sociální média.

Funkce **Auto zap/vyp*** snadno a automaticky šetří baterii, když svá sluchadla zrovna nevyužíváte. Sundejte si je, položte je na plochý, stabilní povrch a po 15 minutách přejdou do nízkoenergetického módu. Zvedněte svá sluchadla a znovu si je nasadíte, automaticky se opět zapnou na plný výkon.

Skóre Thrive*

Oddíl pro nastavení pro skóre Thrive. Pro přesnější sledování kroků můžete doplnit/aktualizovat své demografické údaje. Kromě toho můžete stanovit/změnit cíle pro kroky, cvičení a stav.

*Pro sluchadla Edge AI a AI.

Upozornění na pád*

Funkce citlivosti **automatického upozornění** vám umožňuje seřídit citlivost automatického upozornění

v aplikaci Thrive. Zvýšení citlivosti může zvýšit pravděpodobnost zjištění pádu. Snížení citlivosti může napomoci ke snížení pravděpodobnosti falešných upozornění.

Oddíl **Profil** umožňuje změnit vaše profilové informace.

Indikátory pro **auto upozornění a ruční upozornění** umožňují ověřit a demonstrovat upozornění na pád pro bližší seznámení s funkcionalitou pro případ pádu.

Oddíl **Kontakty** umožňuje vkládat, editovat nebo mazat kontakty.

Časovač zrušení umožňuje zvolit 60 nebo 90 sekund jako stanovenou dobu před odesláním textové zprávy s upozorněním.

Oddíl **Zpráva s upozorněním** umožňuje editaci vašeho jména a zobrazení příkladu textové zprávy s upozorněním.

*Pro sluchadla Edge AI.

Překladač*



Překladač je funkce, která umožňuje zvolit váš jazyk a jazyk druhého mluvčího pro zahájení konverzace. Když mluvíte do telefonu, aplikace vaši řeč přeloží a zobrazí ji v jazyku druhé osoby. Když druhá osoba hovoří do telefonu, aplikace její řeč přeloží, zobrazí ji ve vašem jazyku a provede streamování takto přeloženého textu do vašich sluchadel ve vašem jazyku.

Přepis**

Přepis je funkce, která umožňuje převod do textových titulků v reálných situacích. Když vy nebo ostatní mluvíte do telefonu, aplikace Thrive hovor přepíše a zobrazí ho na obrazovce. Máte rovněž možnost přepsaný text uložit, přeposlat jako zprávu, zkopírovat nebo zaslat jako email.

*Pro sluchadla Edge AI.

**Pro sluchadla Edge AI 2400 a AI 2000.

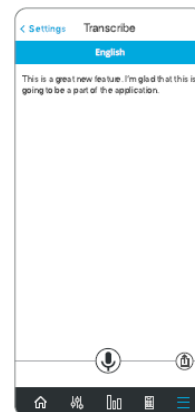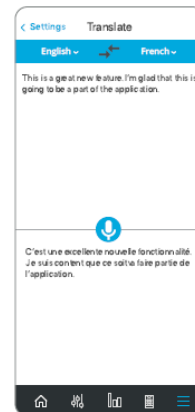

Samokontrola



Samokontrola umožňuje samostatnou rychlou, pohodlnou analýzu výkonu sluchadel. Díky samokontrolě můžete provádět diagnostiku výkonu komponent v rámci sluchadel včetně mikrofonů, přijímače, obvodu a senzorů.

Samokontrola zobrazí výkon jednotlivých komponent a je-li třeba, poskytne vám pokyny pro servis (většina problémů vzniká v důsledku vosku/nečistot a lze je snadno vyřešit). Pro sluchadla AI a další běžná sluchadla provede váš audiolog úvodní nastavení samokontroly a přitom stanoví základní hodnoty platné právě pro vás. Pro sluchadla Edge AI jsou základní hodnoty nastavené z výroby.

Upomínky*

Funkcionalita upomínek vám může pomoci při sledování důležitých úloh a schůzek ve vašem čínorodém životě, aniž byste si je museli pamatovat.



*Pro sluchadla AI 2400, AI 2000/1600 a běžná 2400/2000/1600.

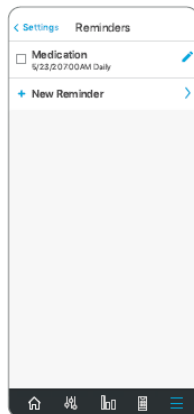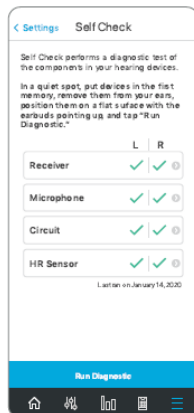

Můžete si nastavit a poté dostávat vizuální upozornění na chytrý telefon a/nebo zvuková upozornění streamovaná z chytrého telefonu prostřednictvím sluchadel na nejrůznější úlohy, například na užívání léků, vyzvedávání receptů, čištění sluchadel, cvičení a pití vody.

Své upomínky můžete navíc i konkretizovat pro vlastní potřeby, např. Vzít si léky na krevní tlak, Vyvenčit psa, Zavolat doktorovi, Přinést láhev s vodou a podložku na jógu. Po stanovení názvu upomínky, data a času můžete zvolit opakování této upomínky denně, týdně, měsíčně nebo ročně.

A nemusíte se bát, že byste úlohu nesplnili, pokud ji nemůžete splnit okamžitě při obdržení upomínky, protože nesplněné úlohy se červeně zobrazují na příslušné obrazovce, dokud je nepotvrdíte.

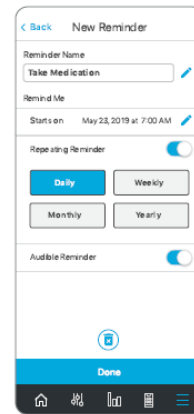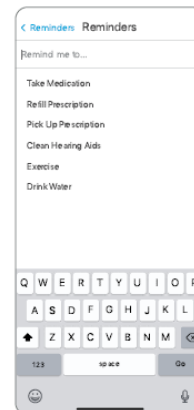

Hearing Care Anywhere

Vytvoření účtu


Nástroj Hearing Care Anywhere (péče o sluch odkudkoli) vyžaduje vytvoření vlastního účtu. Prostřednictvím tohoto účtu mohou být vaše sluchadla zálohována a synchronizována mezi více telefony. Svůj účet si můžete založit během instalace nebo kdykoli později. Účet si můžete vytvořit na základě svého stávajícího účtu na Facebooku nebo Googlu nebo založením vlastního účtu na základě emailu se zadáním libovolného hesla.

Záloha

Když provádíte libovolné změny s využitím aplikace Thrive, tyto změny se ukládají do cloudového účtu a zálohují tak vaše nastavení v reálném čase.


Dálková nastavení

Váš audiolog může aktivovat dálkové programování. To audiologovi umožní vyladit kvalitu vašeho slyšení, aniž byste museli chodit do jeho ordinace.

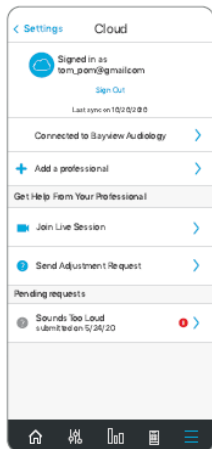

Hodnocení pacientem

Když prostřednictvím nástroje Hearing Care Anywhere kontaktujete svého audiologa s požadavkem na dálkové programování a když audiolog takové programování provádí, můžete poskytnout zpětnou vazbu ohledně své spokojenosti s navrhovanými změnami naprogramování. Budete požádáni o ohodnocení zvuku sluchadel a vaše hodnocení bude zasláno audiologovi, aby mu pomohlo se zajištěním vaší spokojenosti.

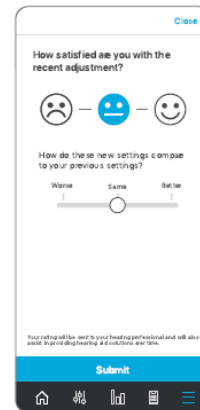


Thrive Care app*

Aplikace Thrive Care přináší klid myslí lidem, s nimiž se rozhodnete sdílet užitečné informace, vám osobně potom pomáhá cítit se sebevědomě a nezávisle.

Díky Thrive Care můžete se svými pečovateli nebo blízkými sdílet takové informace jako je fyzická aktivita, využívání sluchadel, společenské zapojení a další.


*Pro sluchadla Edge AI.

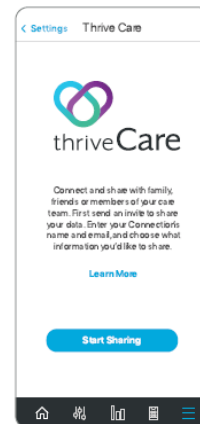

Hledání sluchadel

Funkcionalita hledání sluchadel vám umožní zjistit poslední známé fyzické místo sluchadel na mapě. Po otevření nástroje pro hledání sluchadel se zobrazí mapa s poznámkou zobrazující místo, kde byla vaše sluchadla naposledy připojena.

Pokud jsou vaše sluchadla aktivně připojena (nebo se připojí), oživí se indikační lišty v dolní části obrazovky a vyznačují, jak daleko nebo blízko od vás sluchadla jsou.

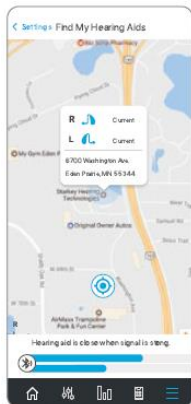

Nastavení aplikace

Možnosti v rámci Nastavení aplikace zahrnují přepínání mezi základním a rozšířeným módem. Rozšířený mód poskytuje plnou funkcionalitu pro všechny funkce aplikace, zatímco základní mód zahrnuje pro jednoduchost pouze podmnožinu základních funkcí.

O nás

Zde se uvádí informace o společnosti Starkey, licenčním ujednání s koncovým uživatelem, zásadách důvěrnosti údajů a verzi aplikace. Je zde rovněž oddíl pro poskytnutí zpětné vazby.

Demo mód

Zde se aplikace Thrive přepíná do demo módu, který umožňuje její práci bez připojených sluchadel tak, aby byla veškerá funkcionalita viditelná pro demonstrační účely. Změny provedené v demo módu nebudou provedeny na sluchadlech.

Pro informace o aplikaci Thrive Hearing Control a kompatibilitě se systémy iOS/Android prosím navštivte stránku starkey.com/thrivesupport.

Apple, logo Apple, iPhone, iPad a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je registrovaná servisní značka společnosti Apple Inc.

Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Hearing Care Anywhere, SoundSpace, Starkey, logo Starkey, Thrive, logo Thrive, Thrive Care, logo Thrive Care a IntelliVoice jsou ochranné známky společnosti Starkey Laboratories, Inc.

iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je užívána na základě licence.

Slovo a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto známek společností Starkey podléhá licenci.



[Starkey.com](https://starkey.com)

6700 Washington Ave. S.
Eden Prairie, MN 55344
1.800.328.8602

